

Repuestos

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO
 VA2-LUX-HP Pieza de mano Óptica	E351050	 Tubo de Suministro de Agua (2m)	U387580	 Soporte para Puntas	Z221080
 VA2-HP Pieza de mano No Óptica	E350050	 Alojamiento de Filtro de Agua	Y900069	 Protector L para Puntas	Z217850
 FC-70 Pedal de control (2,5 m)	Z1008001	 Filtro de Agua	U387042	 Protector S para Puntas	Z217851
 Adaptador AC (2 m)	Y1001767(120V) Y1001762(230V)	 Anillo de Tubo (juego de 2)	Y900077	 Cassette para esterilización	Z1035001
 Conector de Suministro de Agua	U387030	 Llave para Puntas (CR-10)	Z221076	 O-ring (para Cable de Pieza de mano)	0310020 080
 Conjunto de Filtro de Agua (2m) (Tubo suministro de agua 2m, filtro de agua, estuche filtro de agua)	U387040	 Llave de Sustitución de Puntas Tipo-E	Z217399	 Llave española (5x8)	Y1001301



Varios 570

iPiezo engine®



Lavable en termodesinfectante



Esterilizable con autoclave hasta 135°C

NAKANISHI INC.

www.nsk-inc.com

700 Shimohinata Kanuma-shi Tochigi 322-8666, Japan
TEL : +81 (0)289-64-3380 FAX : +81 (0)289-62-5636

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

REF PR-D852SA Ver.1 13.05.00.0

Varios 570 **Óptico / No Óptico**

iPiezo engine®

Compacto y Versátil

Varios 570 ofrece 3 modos de potencia, "G" (General), "E" (Endo) y "P" (Perio), dependiendo de la Punta conectada a la pieza de mano. El nivel de potencia puede ser finamente ajustado dentro de la gama de potencia proporcionada. En particular, el modo P ofrece una potencia mínima pero constante para un tratamiento periodóntico más efectivo.

Ventajas

- Potenciado por iPiezo engine
- Consola de diseño compacto y tamaño adecuado
- Panel de operaciones intuitivo y fácil de usar



iPiezo engine®

Función de Retroalimentación

El iPiezo engine de NSK suministra la energía apropiada a la Punta, dependiendo de las condiciones de la superficie del diente. iPiezo engine proporciona una salida de frecuencia estable, sin perder la potencia, incluso ante el duro cálculo.

Función de Ajuste Automático

La función de ajuste automático proporciona a la Punta una frecuencia estable y suave, dentro del rango de potencia seleccionado. Ello permite que el usuario sienta la potencia de salida y focalice el tratamiento, lo cual asegura el resultado ideal.




Especificaciones

- Fuente de poder : AC 100V-240V 50/60 Hz
- Frecuencia : 28-32 KHz
- Salida máx. : 11 W (Modo G)
- Dimensiones : L 160 x An 135 x Al 65 (mm)
- Peso Consola : 0.43 kg

Bien equilibrada, la pieza de mano más delgada y liviana con iluminación LED

El uso de la delgada pieza de mano permite una excelente accesibilidad y asegura gran visibilidad, ofreciendo un uso más confortable. La pieza de mano es repetidamente esterilizable en autoclave hasta un máximo de 135°C.

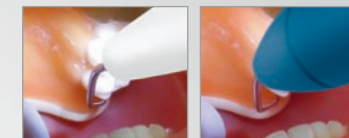

Pieza de mano Varios2

Competidor



LED Óptico Pieza de mano VA2-LUX-HP



No Óptico Pieza de mano VA2-HP



Doble luz LED

El LED NSK proporciona la calidad de la luz natural, brindando grandes ventajas a su trabajo

Más nítida : los LED generan luz de la misma calidad que la natural, lo que asegura mucha más nitidez que la luz halógena.

Duradera : los LED duran más que las lámparas halógenas.

Varios 570 Sets Completos



Óptico Varios 570 Óptico Sets Completos

MODELO: **VA570 LUX (120V)** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1001272**

MODELO: **VA570 LUX (230V)** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1001273**

No Óptico Varios 570 No Óptico Sets Completos

MODELO: **VA570 (120V)** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1001270**

MODELO: **VA570 (230V)** CÓDIGO DE PEDIDO: **Y1001269**

Incluye

- Consola de mando con cable de pieza de mano
- Adaptador de corriente
- Pieza de mano
- Set Filtro de Agua
- Conector de suministro de agua
- Pedal de control (FC-70)
- 3 Puntas de escarificación (G4, G6, G8)
- Llave con Torquímetro para Puntas